



## TRAVELER 4you Ergo

PERFEKTE PASSFORM  
TRIFFT AUF KLEINSTES PACKMASS.

Der TRAVELER 4you Ergo ist Dein individueller Aktiv-Faltrollstuhl mit einer filigranen Rahmengeometrie und ergonomischem Sitzknick. Du kannst 12 Rahmenparameter wählen, wie Kniewinkel, Rahmeneinzug, Radstand oder die Position des Lenkradlagerblocks. Der Rahmen wird ganz nach Deinen Wünschen als Unikat gefertigt. Mit einem kompakten Packmaß ab 17 x 35 x 58 cm kannst Du Deinen TRAVELER 4you Ergo sogar in einer Sporttasche mitnehmen. Viele Einstellungen, wie Kippunkt, Sitzhöhe, Sitzneigung oder Rückenwinkel, kannst Du auch nachträglich auf Deine Bedürfnisse anpassen.




### #Zuverlässigkeit

Dank seiner hervorragenden Stabilität kannst Du den TRAVELER 4you Ergo mit Adaptivbikes, Zug- & Vorsatzgeräten sowie weiteren Adaptationen kombinieren.



### #Individualität

Mit 12 wählbaren Rahmenparametern wird jeder Rahmen zum Unikat. Der Rahmenvorbau kann mit einem Rahmeneinzug ausgeführt werden.

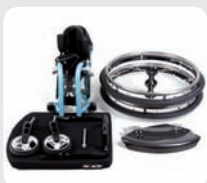

### #Selbstständigkeit

Mit seinem kleinen Packmaß, der abklappbaren Rückenlehne und den werkzeuglos abnehmbaren Baugruppen ist der TRAVELER 4you Ergo leicht zu transportieren.



### #MehrMobilität

Durch das einfache Anfallen kannst Du die Sitzbreite (im Rollstuhl sitzend) um 15 % bzw. 5-10 cm reduzieren, um mühelos schmale Durchgänge passieren zu können.





## INDIVIDUELL ANGEPASST, ERGONOMISCH DESIGNED.

Dein **TRAVELER 4you Ergo** wird individuell nach Deinen Bedürfnissen gefertigt, von den Rahmenmaßen bis zur Ausstattung. Du hast die Wahl bei Optionen wie Fußstützen, Bremsen, Schiebegriffen, Sitz- und Rückensystemen, Kleiderschützern, Armauflagen sowie Antriebs- & Lenkrädern, um Deinen TRAVELER optimal anzupassen.

### EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.



Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze mit Federrastmechanismus ist einfach im Handling und flexibel im Alltag.



#### AUSSTATTUNGSPAKET „PURE“:

Mit diesem Paket erreichst Du ein besonders leichtes Gesamtgewicht ab 10 kg, was neue Maßstäbe in puncto Leichtigkeit setzt. Es bietet innovative, gewichtsoptimierte Features wie Carbon-Seitenteile mit integriertem Kleiderschutz, einen „light“ Anpassrücken mit Rückenpolster sowie eine leichte Fußstütze mit abgerundeter Fußbrettauflage ohne Überstand.



## TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	33 - 52 cm (in 1 cm-Schritten) 33 - 42 cm bei „pure“-Ausstattung
Sitztiefe:	35 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	22 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	37 - 51 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	39 - 47 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	42 - 52 cm (in 1 cm-Schritten)
Kippunkt:	3 - 11 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 11,2 kg ab 10,0 kg bei „pure“-Ausstattung
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 120 kg

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

## FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2024  
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.