



PROACTIV®



30cm



MIT DEM LIFT ACTIV ERREICHST DU MEHR.

Der LIFT activ mit Sitzhöhenverstellung macht Dich im Alltag sowie in verschiedenen Berufen und an unterschiedlichen Arbeitsplätzen flexibel. Du erreichst mühelos Maschinen, Möbel, Kücheneinrichtungen, Drucker und Regale. Häufig sind keine Umbaumaßnahmen notwendig. Mit nur 14,5 kg überzeugt der LIFT activ durch sein leichtes, dynamisches Design und den einfachen Transport.

LIFT activ



#Unabhängigkeit

Mit dem LIFT activ meisterst Du den Alltag noch selbstbestimmter. Beim Einkaufen erreichst Du ohne fremde Hilfe Waren aus den oberen Regalen und bist unabhängig.



#AufAugenhöhe

Mit der stufenlosen Sitzhöhenverstellung liftet der Sitz bis zu 30 cm nach oben. In dieser Position bist Du mit einer stehenden Person von ca. 1,75 m Körpergröße auf Augenhöhe.



#Flexibilität

Dein LIFT activ passt sich Dir an: Der Kipppunkt lässt sich nachträglich verstellen, um auf Deine Bedürfnisse einzugehen.



#Selbstständigkeit

Dank der Gewichtsoptimierung, der abfaltbaren Rückenlehne und der werkzeuglosen Abnahme von Baugruppen kannst Du Deinen LIFT activ einfach transportieren.



PLAYLIST




DEIN SCHLÜSSEL ZU MEHR UNABHÄNGIGKEIT.

Dein **LIFT activ** wird ganz individuell für Dich angefertigt, passend zu Deinen Bedürfnissen. Du hast eine große Auswahl an Ausstattungen – von Fußstützen und Bremsen über Schiebegriffe bis hin zu Sitz- und Rückensystemen sowie Antriebs- und Lenkrädern. So ist Dein LIFT activ genau so, wie Du ihn brauchst.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.

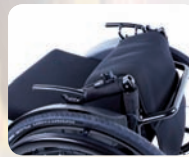

Die am Lordosegelenk abklappbare Rückenlehne ermöglicht ein für den Transport optimales Packmaß – schnell und einfach.



Der Rahmenvorbau abnehmbar und abschwenkbar mit geteilter Fußstütze bietet viel Raum für Deinen Transfer.



Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze ist einfach im Handling und flexibel im Alltag.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite: 35 - 46 cm (in 1 cm-Schritten)

Sitztiefe: 35 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)

Rückenhöhe: 20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)

Unterschenkellänge: 30 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)

Sitzhöhe hinten: 41 - 43 cm (in 1 cm-Schritten)


Sitzhöhe vorne: 45 - 51 cm (in 1 cm-Schritten)

Kippunkt: 6 - 10 cm (in 1 cm-Schritten)

Produktgesamtgewicht: ab 14,5 kg

Max. Belastungsgewicht Standard: bis 100 kg

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

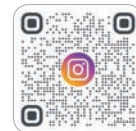

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de