



LITTY 4you

MIT DEM LITTY 4YOU WÄCHST DIE FREIHEIT MIT.

Der Kinderrollstuhl LITTY 4you überzeugt durch eine speziell auf Kinder abgestimmte, individuelle Rahmengestaltung. Dank seines geringen Gewichts ab 6,7 kg und des optimalen Leichtlaufs ist der LITTY 4you besonders wendig und leicht zu manövrieren – ideal auch für Kinder mit geringerer Armkraft. Der Rahmen ohne begrenzende vordere Rahmenrohre ermöglicht eine Sitzpositionierung mit maximaler Abduktion. Der LITTY 4you kann optional mit dem kraftverstärkenden Zusatzantrieb e-motion von Alber ausgestattet werden.




#Mitwachsfunction

Der LITTY 4you wächst durch austauschbare Baugruppen mit dem Kind mit und bleibt so über Jahre ein verlässlicher Begleiter.



#Individualität

Mit 10 wählbaren Rahmenparametern & einer Sitzbreite ab 16 cm bietet der LITTY 4you eine optimale Anpassung. Rahmen & Kleiderschutz werden für jeden LITTY 4you individuell konstruiert und gefertigt.

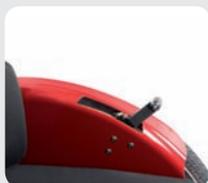


#Sicherheit

Die Bedienung der Kniehebelbremse ist ergonomisch im Kleiderschutz angebracht & der Bremsbolzen ist außerhalb des Greifbereichs, um ein Einklemmen der Finger zu verhindern.



#Unterstützung

Verschiedene Schiebegriffe und -bügel bieten die Möglichkeit der Unterstützung beim Vorankommen, während die Begleitpersonen-Bremsen die Geschwindigkeitskontrolle ermöglichen.

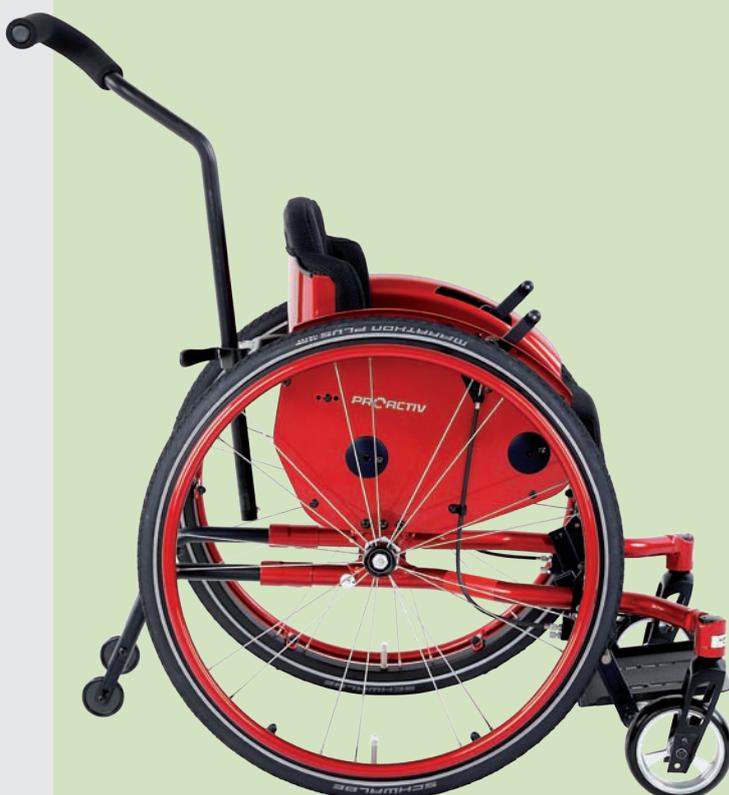

FÜR KINDER GEMACHT, FÜR ABENTEUER BEREIT.

Der **LITTY 4you** wird passgenau auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt – von den Rahmenmaßen bis hin zur Ausstattung. Zahlreiche Optionen wie Fußstützen, Bremsen, Schiebegriffe, Rücken- und Sitzsysteme sowie Antriebs- und Lenkräder bieten vielfältige Anpassungsmöglichkeiten.


EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die „Fußauflage nach hinten hochklappbar“ erleichtert Kindern, die noch stehfähig sind, das Übersetzen aus dem und in den Rollstuhl.



Der Therapie-Tisch bietet eine praktische Arbeitsfläche, ist werkzeuglos abnehmbar und stufenlos in Höhe und Winkel einstellbar für die optimale Anpassung.

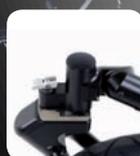

Mit dem **Outdoor-Radvorsatz** wird der LITTY 4you geländetauglich für Pflaster, Schotter und Waldwege. Die Lenkräder werden vom Boden abgehoben und das 12“ Rad überwindet Unebenheiten mühelos. Dank Schnellspannklammer lässt sich der Radvorsatz einfach und werkzeuglos anbringen.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	16 - 38 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	18 - 38 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 45 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	20 - 45 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	31 - 42 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	34 - 47 cm (in 1 cm-Schritten)
Kippunkt:	1 - 10 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 6,7 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 50 kg

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2024_01
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.