



**EINZIGARTIG WIE DU –
FLEXIBEL WIE DEIN LEBEN.**

SPEEDY **4you Ergo**

Der Aktiv-Rollstuhl **SPEEDY 4you Ergo** zeichnet sich durch seinen individuellen Rahmen mit filigraner Geometrie aus. 13 Rahmenparameter sind frei wählbar, wie beispielsweise Kniewinkel, Rahmeneinzug, Radstand sowie Unterschenkelweite oben und unten. So wird der Rahmen zu einem Unikat, das genau auf Dich abgestimmt ist. Dank der integrierten Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung in 1-cm-Schritten kannst Du den **SPEEDY 4you Ergo** jederzeit flexibel an Deine Bedürfnisse anpassen, auch wenn sich diese im Laufe der Zeit ändern sollten.




#Individualität

Mit 13 wählbaren Rahmenparametern wird jeder Rahmen zum Unikat. Der Rahmenvorbau kann mit einem Rahmeneinzug ausgeführt werden.



#Zuverlässigkeit

Stabiler und langlebiger Rahmen für maximale Mobilität und Kompatibilität mit Zusatzantrieben, Handbikes und Zuggeräten.

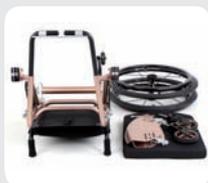

#Selbstständigkeit

Das einfache Abfalten der Rückenlehne und die werkzeuglose Abnahme von Baugruppen ermöglichen den selbstständigen Transport.



#Flexibilität

Integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung in 1 cm-Schritten zur optimalen Anpassung an Deine Bedürfnisse.



PERFEKT AUF DICH ABGESTIMMT.

Der **SPEEDY 4you Ergo** wird genau nach Deinen Wünschen gefertigt. Du kannst aus einer großen Palette an wählbaren Ausstattungen hinsichtlich Fußstützen, Bremsen, Schiebegriffen, Rücken- und Sitzsystemen, Kleiderschützern, Armauflagen sowie Antriebs- und Lenkrädern wählen. Dein Rollstuhl, wie Du ihn brauchst.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.



Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze mit Federrastmechanismus ist einfach im Handling und flexibel im Alltag.



Wendiger Einhandantrieb mit Doppelgreifring für Nutzer mit Halbseitenlähmung oder eingeschränkter Mobilität auf einer Körperseite.



Formschöne Integral- Feststellbremse mit komfortabler und sicherer Bedienung.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	30 - 52 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	36 - 54 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	37 - 50 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	38 - 47 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	42 - 54 cm (in 1 cm-Schritten)
Kippunkt:	3 - 11 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 9,7 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 120 kg
Max. Belastungsgewicht Heavy Duty:	bis 150 kg entsprechende individuelle Maße auf Anfrage

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2024
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.